

デュロメータ/IRHD硬さ計

(ゴム・プラスチック硬さ計)

ゴム硬さ測定のISO及びJIS規格の大幅改訂に対応、新しいラインナップが完成しました

*Durometers &
IRHD
Hardness Tester*

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です。今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています。軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します。



Oリングや小物ゴム部品、薄いゴムシートなどの硬さを測定するために規定されているのがIRHDマイクロゴム硬さ計です。




ポケットタイプと
ピークホールド付
デジタルデュロメータ

規格で決められた重り

ステッピングモータ

タイプAデュロメータ
GS-719R

測定スタンド
GS-610

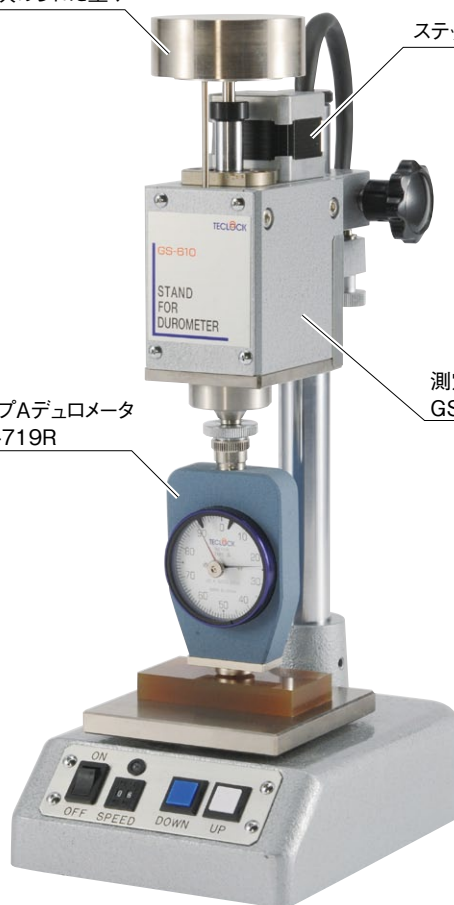

デュロメータを自動測定スタンドに取り付けて硬さ測定を行なうことで、個人差の無い、再現性の高いデータが得られます。


デュロメータの機種選定について/主要規格	96
JIS K 6253準拠	97
深穴型/脚長型・ポケットタイプ	98
JIS K 7215準拠・JIS K 7312/JIS S 6050準拠	99
ASTM D 2240準拠・テックロックオリジナル規格デュロメータ	100
JIS K 6301準拠・薄物シート硬さ向け簡易硬さ計	101
デュロメータ用測定スタンド(自動タイプ・手動タイプ)	102

ゴム硬度計用補助装置	103
デュロメータの定期検査・校正について	103
自動ゴム硬さ測定システム	104
全自動タイプIRHD・M法マイクロサイズ国際ゴム硬さ計	105
デュロメータ規格一覧表	107



デュロメータ

●デュロメータの機種選定について

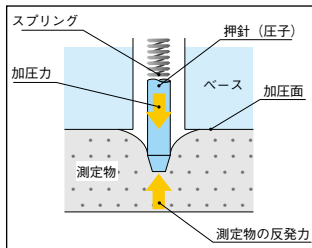

デュロメータ（ゴム・プラスチック硬さ計）による測定値とは、加圧面と測定物を密着させたとき、デュロメータ内部に

あるスプリングにより生じた加圧力で押針が測定物に変形を与えると同時に、測定物はこの力に対し反発力を発生します。この両方の力が平衡状態になったときの押針の押し込み量が「硬さ」の値として指示されます。反発力が弱いと低い値（やわらかい）、反発力が強いと高い値（かたい）となります。

デュロメータはスプリングの力や押針の形状などが異なる様々なタイプがあります。これは測定物の持つ材料特性や表面形状の違いに対し「より高い感度で硬軟の程度を表すこと」を目的に、規格などで決められています。右図を参考に最適な機種選定を行ってください。

FO GS-744G	軟らかい材質
OO GS-754G	
E2 GS-743G	
C GS-701N	
E GS-721N	
O GS-753G	
GS-719N	
A GS-709N	
GS-706N	
B GS-750G	
DO GS-752G	
C GS-751G	
GS-703N	
D GS-720N	硬い材質
GS-702N	

●ウレタンフォーム●車輻シート用クッション材●食器洗い用スポンジ●こんにゃく

●超軟質ゴム●フォームラバー●OA機器用帯電ロール／加圧ロール●チューニングガム

●軟質ゴム●プロセスチーズ●布巻き物●陶土・粘土●建築用シーラント

●軟質ゴム●消しゴム●フィルムロール●紡績ロール●発泡ゴムロール●A20未満の場合に使用

●軟質ゴム●紡績ロール●皮革●ダンボール●発泡スチロール

●一般ゴム・エラストマー●軟質プラスチック●タイヤ●ゴムロール●ゴムホース●D20未満の場合に使用

●半硬質ゴム●素焼き陶土●木材

●半硬質ゴム●床材・建材●自動車用ハンドル／内装材

●硬質ゴム●ゴルフボール●自転車用ブレーキゴム

●硬質ゴム●プラスチック●エポナイト●A90以上の場合に使用

※型式末尾にNのタイプは置針式のGもあります。末尾がGのタイプは置針式のみになります。

●デュロメータの主要規格

規 格	規定されているタイプ	測定値読み取りの タイミング	タイプAによる 測定値50の表記	測定結果の まとめ方
JIS K 6253 -2012 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム 硬さの求め方	タイプ A, D, Eデュロメータ	加硫ゴム3秒 熱可塑性ゴム15秒 または一定時間後	A 50	5点中央値
JIS K 7215 -1986 プラスチックのデュロメータ 硬さ試験方法	タイプ A 及び Dデュロメータ	原則として1秒以内	HDA 50	少なくとも5点の平均値
JIS S 6050 -2002 プラスチック字消し	—	密着後直ちに	規定なし	3点中央値
JIS K 7312 -1996 熱硬化性ポリウレタンエラストマー 成形物の物理試験方法	タイプ A (ショアA) タイプ D (ショアD) タイプ C (アスカ-C)	密着後直ちに	HsA 50	5点中央値
JIS K 6301 -1995 加硫ゴム物理試験方法 (1998年8月廃止)	スプリング式硬さ試験機 A 形 及び C 形	加圧面を密着させて直ちに	50 HsJIS A	5点平均値
ISO 7619 -2010 ゴム・ポケット硬度計による 硬さ試験方法	タイプ A,E(AO),Dデュロメータ	加硫ゴム3秒 熱可塑性ゴム15秒 または一定時間後	A 50	5点中央値
ISO 868 -2003 プラスチック・デュロメータ 硬さ試験方法	タイプ A 及び Dデュロメータ	密着させて1秒以内。 または15±1秒	A / 50 / 1	5点平均値
ASTM D 2240 -05 ゴム特性・デュロメータ 硬さ試験方法	タイプ A,B,C,D,E,DO,O,OO デュロメータ	密着させて1秒以内（最大値）。 または取り決めた一定時間後	A / 50 / 1	5点中央値
DIN 53 505 -2000 ゴム及びプラスチックの ショアA,D硬さ試験	タイプ A 及び Dデュロメータ	3秒後 または 15秒後	50 A (経過時間を明記)	最低3点の中央値



手押しによる硬さ測定は、デュロメータを真上から測定物に押し当て、加圧面を密着させて値を読み取ります。



測定値の個人差を解消するため、デュロメータをスタンドに取り付けて硬さ測定することも規格に明記されています。

●デュロメータによる硬さ測定について

- ① 手押しの場合は、平らな面に置いた試料の平面に、両手で保持したデュロメータの加圧面を真上から一定速度で垂直に押し付け、密着後、各規格に規定された経過時間の値を「硬さ」としてください。
- ② デュロメータをスタンドに取り付けて硬さ測定をする場合、測定速度(3.2mm/sec以下)や加圧荷重(タイプA、Eは1kgf、タイプDは5kgf)及びタイプA、Dデュロメータの加圧面直径(Φ18mm)が公差も含め規定されています。
- ③ 試料の測定位置は試料の端から12mm以上内側、間隔は6mm以上。厚みは通常6mm以上、タイプEは10mm以上。
- ④ 試験環境は温度23±2度、湿度50±5%。5ヶ所の中央値あるいは平均値を測定値に採用し、タイプAで50を示した場合、「A50」と表記。
などと各規格に規定されています。



JIS K 6253準拠 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム硬さの求め方


アナログ

デジタル

ISO規格

JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1～2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。

標準タイプ

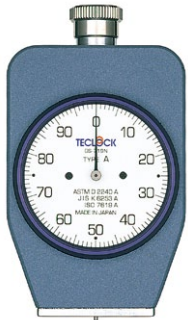

GS-719N

タイプAデュロメータ
・一般ゴム用



GSD-719J


タイプAデュロメータ
・デジタル式
・ピークホールド付

ピークホールド機能付デジタルデュロメータ

- ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
- 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。
- オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。

スタンド取付兼用・加圧面φ18mmデュロメータ

測定スタンドに取り付けるタイプA及びタイプDデュロメータの加圧面直径がJISやISO規格で18mmと規定されました。φ18mmタイプA(GS-719R)、タイプD(GS-720R)ともに、手押し測定用としても、そのまま使用できます。

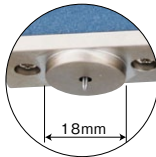

GS-719R

タイプAデュロメータ
・スタンド取付兼用型
・置針式



GSD-719J-R

タイプAデュロメータ
・デジタル式
・スタンド取付兼用型
・ピークホールド付


仕 様

型 式	タ イ プ	用 途	準 拠 規 格	スプリング荷重値 硬さ0-100	押針形状 (mm)	押針高さ (mm)	質量 (g)	標準価格
GS-719N	タイプA	一般ゴム(中硬さ用)	JIS K 6253	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	200	¥42,000
GS-719G	タイプA(置針式)	一般ゴム(中硬さ用)	ISO 7619	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	208	¥48,000
GS-719R	タイプAφ18mm/スタンド兼用	一般ゴム(中硬さ用)	ISO 868	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	213	¥53,000
GS-720N	タイプD	硬質ゴム(高硬さ用)	ISO 2240	0-44450mN (0-4538gf)	先端R0.1 30°円すい形	2.50	200	¥42,000
GS-720G	タイプD(置針式)	硬質ゴム(高硬さ用)	ASTM D 2240	0-44450mN (0-4538gf)	先端R0.1 30°円すい形	2.50	208	¥48,000
GS-720R	タイプDφ18mm/スタンド兼用	硬質ゴム(高硬さ用)	DIN 53 505(Rタイプのみ)	0-44450mN (0-4538gf)	先端R0.1 30°円すい形	2.50	213	¥53,000
GS-721N	タイプE(AO)	軟質ゴム(低硬さ用)	JIS K 6253	550-8050mN (56.1-821.1gf)	半球2.50	2.50	200	¥46,000
GS-721G	タイプE(置針式)	軟質ゴム(低硬さ用)	ISO 7619	550-8050mN (56.1-821.1gf)	半球2.50	2.50	208	¥52,000
GS-719P	タイプA(ポケットタイプ)	一般ゴム(中硬さ用)	ASTM D 2240	550-8050mN (56.1-821.1gf)	半球形	2.50	125	¥43,000
GSD-719J	タイプA	一般ゴム・軟質プラスチック	JIS K 6253, JIS K 7215, ISO 7619, ISO 868, ASTM D 2240	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	313	¥113,800
GSD-720J	タイプD	硬質ゴム・プラスチック	JIS K 6253, ISO 7619 ASTM D 2240	0-44450mN (0-4533gf)	先端R0.1 30°円すい形	2.50	313	¥114,500
GSD-721J	タイプE(AO)	軟質ゴム	JIS K 6253, ISO 7619 ASTM D 2240	550-8050mN (56.1-821.1gf)	半径2.50 半球形	2.50	313	¥114,500
GSD-719J-R	タイプAφ18mm スタンド取付兼用型	一般ゴム(中硬さ用)	JIS K 6253, ISO 7619 ISO 868, ASTM D 2240 DIN 53 505	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	320	¥122,200
GSD-720J-R	タイプDφ18mm スタンド取付兼用型	硬質ゴム(高硬さ用)		0-44450mN (0-4533gf)	先端R0.1 30°円すい形	2.50	320	¥122,900

*GS-719Pポケットタイプについては98ページをご覧ください。

置針式について(型式末尾G.R.H.L.P)

ゴム、エラストマーなどの弾性体の中には、デュロメータの加圧面が密着した直後から、クリープ特性などの要因により指示値が下がり最高値が読み取りにくいものがあります。指針は降下していく値を示し続けるものの、置針は最高値で保持していますので、読み取りの精度が高まります。また測定はできるものの、何らかの障害物により直接指針が見えない場合、測定後に置針で値の確認ができます。置針式には上下限リミッタを標準装着していますので、硬さの値の公差判定にも有効です。

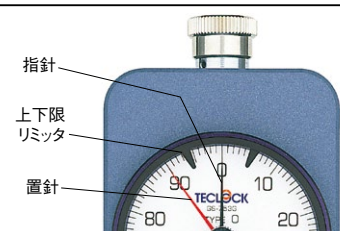



アナログ デジタル

- ・深穴（H）型
- ・置針式



- ・脚長（L）型
- ・置針式



- ・デジタル式深穴(H)型
- ・ピークホールド付



- ・デジタル式脚長(L)型
- ・ピークホールド付

	型 式	タイプ	用 途	準 拠 規 格	スプリング荷重値 硬さ0-100	押針形状 (mm)	加圧面直径 (mm)	押針高さ (mm)	質量 (g)	標準価格
アナログ	GS-719H	タイプA	一般ゴム 深穴(細穴)型	JIS K 6253, ISO 7619 ASTM D 2240	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形先端	φ12	2.50	120	¥58,000
	GS-719L	タイプA	一般ゴム 脚長(太穴)型	JIS K 6253, ISO 7619 ASTM D 2240, DIN 53 505	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形先端	φ18	2.50	360	受注生産
	GS-720H	タイプD	硬質ゴム 深穴(細穴)型	JIS K 6253, ISO 7619 ASTM D 2240	0-44450mN (0-4533gf)	R0.1 30°円すい形	φ12	2.50	120	¥58,000
	GS-720L	タイプD	硬質ゴム 脚長(太穴)型	JIS K 6253, ISO 7619 ASTM D 2240, DIN 53 505	0-44450mN (0-4533gf)	R0.1 30°円すい形	φ18	2.50	360	受注生産
デジタル	GSD-719J-H	タイプA	一般ゴム 深穴(細穴)型	JIS K 6253, JIS K 7215, ISO 7619, ISO868, ASTM D 2240	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形先端	φ12	2.50	170	受注生産
	GSD-719J-L	タイプA	一般ゴム 脚長(太穴)型	JIS K 6253, JIS K 7215, ISO 7619, ISO868, ASTM D 2240, DIN 53 505	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形先端	φ18	2.50	380	受注生産
	GSD-720J-H	タイプD	硬質ゴム 深穴(細穴)型	JIS K 6253, JIS K 7215, ISO 7619, ISO868, ASTM D 2240	0-44450mN (0-4533gf)	R0.1 30°円すい形	φ12	2.50	170	受注生産
	GSD-720J-L	タイプD	硬質ゴム 脚長(太穴)型	JIS K 6253, JIS K 7215, ISO 7619, ISO868, ASTM D 2240, DIN 53 505	0-44450mN (0-4533gf)	R0.1 30°円すい形	φ18	2.50	380	受注生産

※全機種ともデュロメータ用スタンドには取付けできません。


アナログ

GS-719P
GS-709P

タイプAデュロメータ
・置針式

標準タイプ^o(左)との大きさ比較


型式	タイプ	用 途	準 拠 規 格	スプリング荷重値 硬さ0-100	押針形状 (mm)	押針高さ (mm)	質量 (g)	標準価格
GS-719P	タイプA	一般ゴム(中硬さ用)	JIS K 6253	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	125	¥43,000
GS-709P	タイプA	軟質プラスチック・一般ゴム	JIS K 7215	549-8061mN (55.8-822gf)				¥43,000

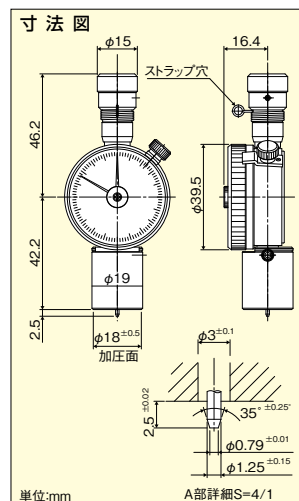



JIS K 7215準拠 プラスチックのデュロメータ硬さ試験方法

アナログ デジタル

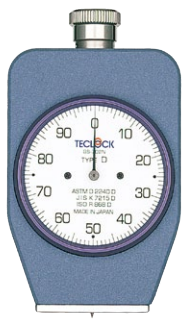

GS-702N

タイプDデュロメータ

・プラスチック
硬質ゴム用

GS-709N

タイプAデュロメータ

・軟質プラスチック
一般ゴム用

ゴムの硬さ試験方法とは別に、わが国のプラスチック業界によって定められているのがこの規格です。スプリング荷重値の丸め方などが違うだけで、JIS K 6253のデュロメータと基本的には同一のものです。弊社では規格準拠の観点から、別のデュロメータとして型式を区別しています。

仕 様

型 式	タ イ プ	用 途	準 拠 規 格	スプリング荷重値 硬さ0-100	押針形状 (mm)	押針高さ (mm)	質量 (g)	標準価格
GS-702N	タイプD	プラスチック・硬質ゴム	JIS K 7215	0-44483mN (0-4536gf)	先端R0.1 30°円すい形	2.50	200	¥42,000
GS-702G	タイプD(置針式)	プラスチック・硬質ゴム	ISO 868	0-44483mN (0-4536gf)	先端R0.1 30°円すい形	2.50	208	¥48,000
GS-709N	タイプA	軟質プラスチック・一般ゴム	ASTM D 2240	549-8061mN (56-822gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	200	¥42,000
GS-709G	タイプA(置針式)	軟質プラスチック・一般ゴム		549-8061mN (56-822gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	208	¥48,000
GS-709P	タイプA(ポケットタイプ)	軟質プラスチック・一般ゴム	JIS K 7215	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	125	¥43,000
GSD-719J	タイプA	軟質プラスチック・一般ゴム	JIS K 6253, JIS K 7215, ISO 7619, ISO 868, ASTM D 2240	549-8061mN (55-822gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	313	¥113,800
GSD-720J	タイプD	硬質ゴム・プラスチック		0-44450mN (0-4533gf)	先端R0.1 30°円すい形	2.50	313	¥114,500

*デジタルタイプの特徴に関しては97ページをご覧ください。 *GS-709Pポケットタイプについては98ページをご覧ください。

JIS K 7312/JIS S 6050準拠 熱硬化性ポリウレタンエラストマー成形物の物理試験方法

アナログ デジタル



GS-701N

タイプC(アスカーC)

・軟質ゴム
消しゴム用

ポリウレタンエラストマーの物理試験方法についての規定。試験項目のひとつに硬さ試験があり、タイプAデュロメータをショアーA、タイプDをショアーD、さらに低硬度領域用のタイプCをアスカーCと呼称されていることが明記されておりGS-701N(G)はこのアスカーCと同一製品です。また、JIS S 6050「プラスチック字消し」の硬さ試験にも準拠しています。なお、これらの規格の元になっていたSRIS 0101(日本ゴム協会標準規格)はすでに廃止されています。

仕 様

型 式	タ イ プ	用 途	準 拠 規 格	スプリング荷重値 硬さ0-100	押針形状 (mm)	押針高さ (mm)	質量 (g)	標準価格
GS-701N	タイプC	軟質ゴム・発泡ゴム	JIS K 7312	0.54N-8.39N (55.1-855.5gf)	直径5.08 半球形	2.54	200	¥42,000
GS-701G	タイプC(置針式)		JIS S 6050	0.54N-8.39N (55.1-855.5gf)	直径5.08 半球形	2.54	208	¥48,000
GSD-701J	タイプC	消しゴム・巻き糸	SRIS 0101(廃止規格)	0.54N-8.39N (55.1-855.5gf)	直径5.08 半球形	2.54	313	¥113,800

*デジタルタイプの特徴に関しては97ページをご覧ください。



ASTM D 2240準拠 ゴム特性・デュロメータ硬さ試験方法

アナログ デジタル


米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。テックロックでは硬質材料用途から超軟質材料用途までであるこのASTMのデュロメータをラインナップしました。なおタイプ000デュロメータも特注生産しています。



GS-750G

タイプBデュロメータ

・半硬質ゴム用

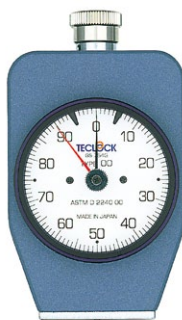

GS-754G

タイプ00デュロメータ

・超軟質ゴム用

仕 様

型 式	タ イ プ	用 途	準 拠 規 格	スプリング荷重値 硬さ0-100	押針形状 (mm)	押針高さ (mm)	質量 (g)	標準価格
GS-750G	タイプB(置針式)	半硬質ゴム	ASTM D 2240	550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端R0.1 30°円すい形	2.50	208	¥52,000
GS-751G	タイプC(置針式)	硬質ゴム		0-44450mN (0-4533gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	208	¥52,000
GS-752G	タイプD0(置針式)	半硬質ゴム		0-44450mN (0-4533gf)	先端R1.19 半球形	2.50	208	¥52,000
GS-753G	タイプO(置針式)	軟質ゴム		550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端R1.19 半球形	2.50	208	¥58,000
GS-754G	タイプ00(置針式)	超軟質ゴム		203-1111mN (20.7-113.3gf)	先端R1.19 半球形	2.50	208	¥58,000
GSD-750J	タイプB	半硬質ゴム		550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端R0.1 30°円すい形	2.50	313	¥123,900
GSD-751J	タイプC	硬質ゴム		0-44450mN (0-4533gf)	先端直径0.79 35°円すい台形	2.50	313	¥123,900
GSD-752J	タイプD0	半硬質ゴム		0-44450mN (0-4533gf)	先端R1.19 半球形	2.50	313	¥123,900
GSD-753J	タイプO	軟質ゴム		550-8050mN (56.1-821.1gf)	先端R1.19 半球形	2.50	313	¥123,900
GSD-754J	タイプ00	超軟質ゴム		203-1111mN (20.7-113.3gf)	先端R1.19 半球形	2.50	313	¥123,900

*デジタルタイプの特徴に関しては97ページをご覧ください。タイプA,D,Eの各デュロメータもASTM D 2240に準拠しています。

テックロックオリジナル規格デュロメータ

アナログ デジタル

規格には規定されていないものの、テックロック独自の規格としてラインナップしました。押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に、かつタイプAの近似値で測定できる簡易型硬さ計GS-779G(P12参照)、タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗い用のスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプF0の3タイプの硬さ計があります。



GS-743G

タイプE2
デュロメータ

・軟質ゴム用



GS-744G

タイプF0
デュロメータ

・軟質発泡体用

単位:mm



GS-744Gをスポンジシートに置いて、硬さを測定しています。発泡度合の分散性も判定できます。

仕 様

型 式	タ イ プ	用 途	準 拠 規 格	スプリング荷重値 硬さ0-100	押針形状 (mm)	押針高さ (mm)	質量 (g)	標準価格
GS-743G	タイプE2(置針式)	軟質ゴム	テックロックE2	550-4300mN (56.1-438.6gf)	半径2.50 半球形	2.50	208	¥52,000
GS-744G	タイプF0(置針式)	軟質発泡体	テックロックF0	550-4300mN (56.1-438.6gf)	直径25.2 円筒形	2.50	500	¥68,000
GSD-743J	タイプE2	軟質ゴム	テックロックE2	550-4300mN (56.1-438.6gf)	半径2.50 半球形	2.50	313	¥113,800
GSD-744J	タイプF0	軟質発泡体	テックロックF0	550-4300mN (56.1-438.6gf)	直径25.2 円筒形	2.50	500	¥136,600

*デジタルタイプの特徴に関しては97ページをご覧ください。




JIS K 6301 準拠 加硫ゴム物理試験方法(1998年8月廃止)

アナログ デジタル



GS-703N

旧JIS C形
・硬質ゴム
・エポナイト用

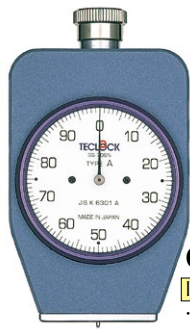

GS-706N

旧JIS A形
・一般ゴム用

1950年に制定され、わが国のゴム産業の根幹を支えてきたJIS K 6301は、ISOに整合していないということから新たにJIS K 6253が規定されたことを受け、猶予期間を経て1998年に廃止になりました。しかしながら約60年にわたって“ゴム硬度計”として使われ続けており、新JISへの移行が進み、規格が廃止になった今でも一部では当事者間合意の上の試験データとして使用されています。一般ゴム用のスプリング式A形と硬質ゴム用のC形の2機種があります。

□ 仕 様

	型 式	タ イ プ	用 途	準 拠 規 格	スプリング荷重値 硬さ0-100	押針形状 (mm)	押針高さ (mm)	質量 (g)	標準価格
アナログ	GS-703N	旧JIS C形	硬質ゴム	JIS K 6301 スプリング式C形	980-44100mN (100-4500gf)	先端直径0.79 35°円すい台形先端	2.54	200	¥42,000
	GS-703G	旧C形(置針式)	硬質ゴム	JIS K 6301 スプリング式C形	980-44100mN (100-4500gf)	35°円すい台形先端 直径0.79	2.54	208	¥48,000
	GS-706N	旧JIS A形	一般ゴム	JIS K 6301 スプリング式A形	539-8385mN (55-855gf)	35°円すい台形先端 直径0.79	2.54	200	¥42,000
	GS-706G	旧A形(置針式)	一般ゴム	JIS K 6301 スプリング式A形	539-8385mN (55-855gf)	35°円すい台形 先端直径0.79	2.54	208	¥48,000
デジタル	GSD-706J	A形(旧)	一般ゴム	JIS K 6301 スプリング式A形	539-8385mN (55-855gf)	35°円すい台形	2.54	313	¥113,800

*デジタルタイプの特徴に関しては97ページをご覧ください。

薄物シート硬さ向け・簡易硬さ計

アナログ

新製品




ゴムやエラストマーなどの薄物シートの硬さ測定を行う、簡易硬さ計です。押針の高さは通常のデュロメータの2.5分の1の1mm。シートの硬さの分散性や相対比較に有効です。テクロックのオリジナル規格ですが、得られる値はタイプAデュロメータに近い値になるよう、設計しました。

GS-779G

・質量125g
・置針式

標準価格
¥66,000






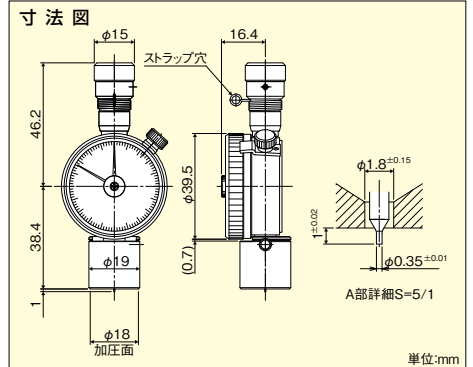


●外形寸法図


アナログ式

デジタル式


タイプFO(744G)

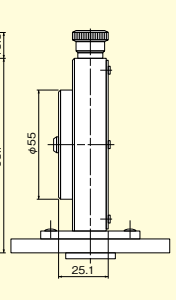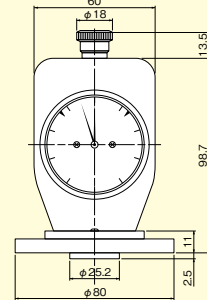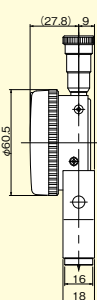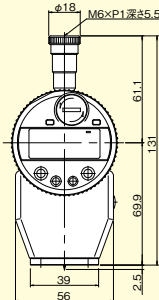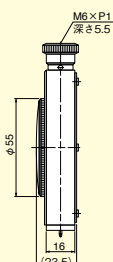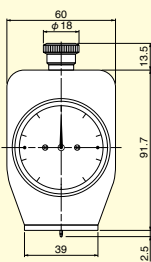


深穴式(アナログ式)

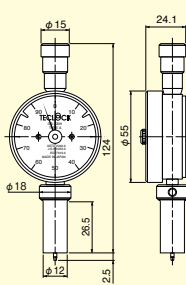


脚長式(アナログ式)

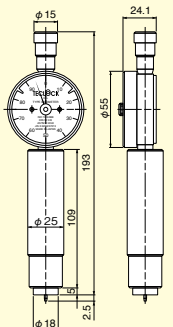

深穴式(デジタル式)

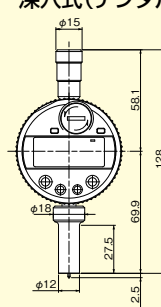

脚長式(デジタル式)

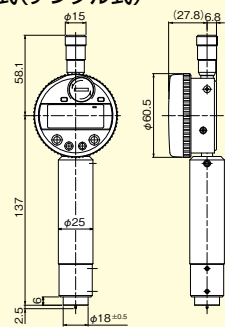

単位:mm




デュロメータ用測定スタンド

ISO規格

手押しでのデュロメータによる硬さ測定を行う場合、個人差などの要因が測定値のばらつきとなることがあります。そのため、より安定した、再現性の高い測定方法として製品化したのが、JISやISOに規定されている測定スタンドです。

■自動タイプ・モータ駆動デュロメータスタンド

- スイッチ操作だけで規格に決められている荷重・速度でデュロメータによる硬さ測定が行なえます。
- ステッピングモータ駆動の採用により、ゴム硬さ測定の手押しによるデータのバラツキを大きく改善、安定した測定値が得られます。
- デュロメータの押針（測定子）と試料との高い密着性を実現したアライメントユニットを搭載しました。
- タイプA、タイプEデュロメータなどはそのまま1kg測定ができます。
タイプDでの測定はオプションの5kg測定用重りZY-046が必要です。デジタルデュロメータGSDシリーズはオプションの1kg用測定重りZY-090が必要です。
- 校正書類の発行ができます。

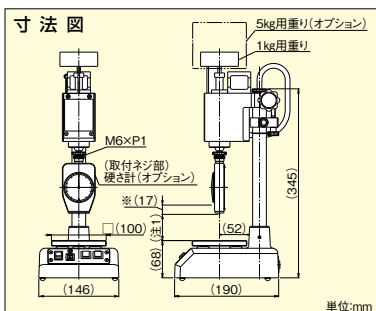

※モータによる開口寸法
(注1) ワーク厚さMAX
・デジタル硬さ計21mm
・アナログ硬さ計47mm
・L型使用不可

□仕様

測定荷重	装着重りコードNo.	適応するデュロメータのタイプ
1kg用重り	アナログタイプ用 デジタルタイプ用	ZY-089(付属) ZY-090(オプション)
5kg用重り(4kg重り)	ZY-046(オプション)	A, B, E, IIA, IISRSIS, O D, ASTM C, DO, IJIS C
下降速度可変範囲	1 [mm/sec]~19 [mm/sec], 1 [mm/sec] 間隔	
電源	AC100V (ACアダプタ付属)	
質量	9kg	
標準価格	GS-610 ¥248,000 / ZY-046 ¥38,000 / ZY-090 ¥12,200	




■手動タイプデュロメータスタンド

- デュロメータを取り付け、手動によりJISなどに規定されている荷重でゴムの硬さ測定が行えます。
- カム式を採用し、使い易さとコストパフォーマンスを実現。
- デュロメータの押針（測定子）と試料との高い密着性を実現したアライメントユニットを搭載しました。
- タイプA、タイプEデュロメータなどはそのまま1kg測定ができます。
タイプDでの測定はオプションの5kg測定用重りZY-046が必要です。デジタルデュロメータGSDシリーズはオプションの1kg用測定重りZY-079が必要です。
- 質量の校正書類が発行できます（操作速度の証明はできません）。




新製品

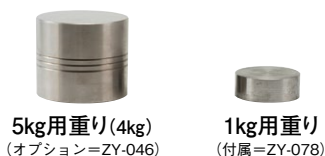

□仕様

測定荷重	装着重りコードNo.	適応するデュロメータのタイプ
1kg用重り	アナログタイプ用 デジタルタイプ用	ZY-078(付属) ZY-079(オプション)
5kg用重り(4kg重り)	ZY-046(オプション)	A, B, E, IIA, IISRSIS, O D, ASTM C, DO, IJIS C
質量	3.9kg	
標準価格	GS-615 ¥74,800 / ZY-046 ¥38,000 / ZY-079 ¥12,200	

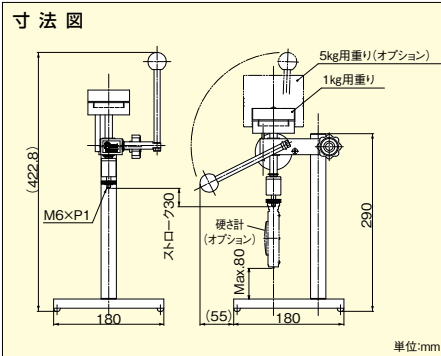

※デュロメータ用スタンドに採用のアライメントユニットについて

前後左右自在に可動するため、デュロメータ加圧面と試料測定面との高い密着性を実現した新機能です。
GS-610、GS-615、GX-01シリーズに搭載。





ゴム硬度計用補助装置

■ゴム硬度計用定圧荷重器

- 油圧式の定圧荷重による、硬さ測定のための補助装置です。タイプAデュロメータは約1kg、タイプDではオプション分銅により約5kg荷重での測定が行えます。
- 旧JIS対応製品のため校正書類の発行はできません。

荷重値	対応するデュロメータのタイプ
約1kg	A, B, E, 11A, SRIS, O
約5kg	D, ASTM C, DO, 旧JIS C



GS-710


オプション

5kg用重り(4kg)
(オプション=ZY-046)

※レバーによる開口寸法
(注1) ワーク厚さMAX
・デジタル硬さ計20mm
・アナログ硬さ計63mm
・L型使用不可

□仕様

型式	質量	標準価格
GS-710	7kg	¥183,000
ZY-046	4kg	¥38,000

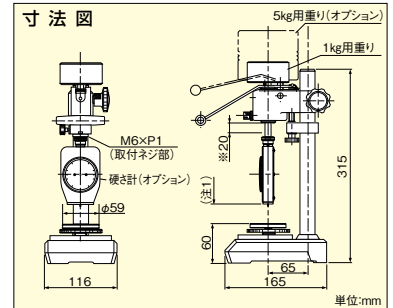

デュロメータの定期検査・校正について

デュロメータは試験機です。ISO 9001 (JIS Q 9001) の「監視機器」及び「測定機器」に該当する場合には、それに沿った管理をして行く必要があります。テクロックはISO 9001の認証を受けている数少ないデュロメータメーカーであり、ISOに必要なトレーサビリティ体系図、校正証明・検査成績書のいわゆる3点セットの発行も独自で行っています。

また、社内検査に必要なデュロメータテスト、針高ゲージにも3点セットの発行ができます。社内の校正基準に基づいた管理にお役立てください。


■デュロメータテスト

アナログ式デュロメータのスプリング荷重値を簡易的に確認する検査器です。倒立させたデュロメータに3個の基準分銅により所定の荷重を与え、25、50、75の目盛が正しく指示しているかを検査します。校正証明書の発行もできます(デジタル式デュロメータ及び他社製品の校正はできません)。

なお国内外の規格では上皿天秤の機構を使い、デュロメータを正立姿勢で検査する方法が紹介されています。



GS-607

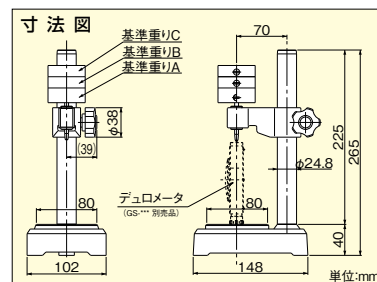

□仕様

型式	対応機種	質量(kg)	標準価格
GS-607	GS-701N/GS-701G/GS-706N/GS-706G	3.7	¥65,000
GS-607A	GS-709N/GS-709G	3.7	¥78,330
GS-607B	GS-719N/GS-719G/GS-721N/GS-721G	3.7	¥78,330
GS-607C	GS-743G	3.7	¥78,330

タイプDデュロメータ用テストは製造しておりません。
校正証明書の発行ができます。

写真のデュロメータは別売です。


■針高ゲージ

デュロメータの押針(測定子)の高さを簡易チェックします。ZY-119はJIS K6301用、ZY-120はJIS K6253用です。他社製品のチェックも可能です。

□仕様

型式	針高さ	針高さ50	針高さ2	主な適用機種	標準価格
ZY-119	2.54mm用	1.27mm	2.489mm	GS-701N, 706N	¥16,000
ZY-120	2.5mm用	1.25mm	2.45mm	GS-719N, 720N	¥16,000

校正証明書の発行ができます。

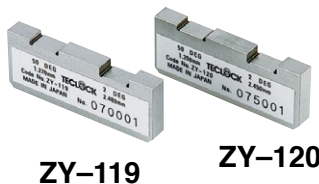



自動ゴム硬さ測定システム GX-01シリーズ JIS K 6253準拠

自動測定スタンド〔GS-610〕、デュロメータセンサ〔GSS-719またはGSS-720〕、カウンタ〔GSS-C01〕を組み合わせることで、JIS K 6253「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム硬さの求め方」に規定された操作速度、測定質量、加圧面寸法*で測定が行える自動ゴム硬さ測定システムのGX-01シリーズが完成しました。

新製品

ISO規格

- ピークホールド、タイマーホールド、中央値、平均値、公差判定などの表示及び出力が行えます。
- タイプAのGX-01Aは1kg荷重で、タイプDのGX-01Dは5kg荷重で、それぞれ自動硬さ測定が行えます。
- タイプA、タイプDのセンサの変更が可能です。
なお、タイプDによる測定はオプションの4kg重り(ZY-046)が必要です。
- パソコンやプリンタとの接続も可能。
- デュロメータセンサ取り付け部には、試料との高い密着性を実現したアライメントユニットを採用しています。
- 校正書類の発行が行えます。

※操作速度:3.2mm/sec以下、測定質量:タイプA=1^{+0.5}_{-0.5}kg、タイプD=5^{+0.5}_{-0.5}kg、
(いずれもデュロメータ質量との合計)、加圧面寸法:φ18±0.5mm
=JIS K 6253に規定

- 専用置き台(オプション)を使用して場所を取らない縦置きを設置もできます。

アライメント
ユニット

デュロメータセンサ
GSS-719 (タイプA)
GSS-720 (タイプD)
*ワーク厚さMAX35mm

GSS-719(タイプA) センサ部



GSS-C01




GS-610




自動硬さ測定システム構成図

型式:GX-01A(タイプA)

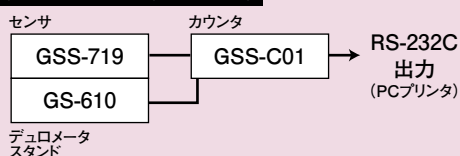

型式:GX-01D(タイプD)

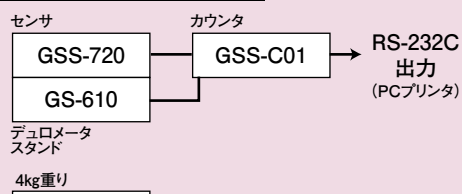

【システム機能】

ピークホールド機能、タイマーホールド機能(タイマー値0.5,1~30sec)、公差判定機能、中央値判定機能(n=1~30)、平均値出力機能、データ出力(PC、プリンタ)、外部機能コントロール出力(GS-610との組合せ時ワンボタンで自動測定開始)

□ 仕様 (カウンタ)

型式	GSS-C01
規格	ISO 7619 / JIS K 6253準拠
最小表示量	0.1
外部インターフェイス	RS-232C
電源	AC100~240V(ACアダプタ)
寸法	150(W)×160(L)×45(H)mm
質量	2kg

□ 仕様 (センサ部)

型式	GSS-719(タイプA用) GSS-720(タイプD用)
加圧面直径	φ18mm
コード長	2m
寸法	32.6(W)×24(L)×138.6(H)mm
質量	160g

□ システム標準価格

型式	要見積
GX-01A(タイプA)	要見積
GX-01D(タイプD)	要見積 (ZY-046含む)

デュロメータスタンドGS-610の仕様はP102をご参照ください。

※測定には付属の1kg用重り(ZY-089)をZY-078に交換する必要があります。



全自動タイプIRHD・M法マイクロサイズ国際ゴム硬さ計GS-680


JIS K 6253準拠

ISO規格

- Oリングや小物ゴム部品など、通常のデュロメータでは測定困難な試料の硬さを、全自動で測定できます。
- 荷重システムにはボイスコイルモータを採用。ウェイト式と違い、内部機構の摩擦の影響を受けないため、測定データの精度・再現性を高めました。
- プランジャ(測定子)の交換が簡単なプラグインタイプ。国産品のため、メンテナンスの対応も迅速です。
- 試料台が広いので、様々な測定治具の設置が可能です。
- 測定回数、上下限判定、中央値表示などの設定は全て前面パネルで行えます。
- PCアプリケーションソフト日本語版(専用CD)を付属しているため、そのままパソコンでのデータ解析や蓄積等の管理が行えます。
- JIS K 6253の国際ゴム硬さ試験・M法に準拠。
- 校正書類の発行ができます。



パソコン接続例

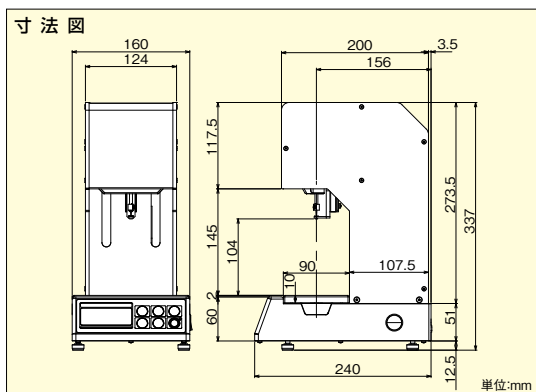

仕様

準拠規格	ISO 48、JIS K 6253
測定範囲	30~100 IRHD
最小表示単位	0.1 IRHD
測定精度	±0.1 IRHD(測長距離にて換算)
測定部昇降距離	100mm
自己診断機能	LCDにエラーコード表示
外部インターフェイス	RS-232C出力
適合規格	EC指令(EN61326)
測定可能試料寸法	W=160/D=110/H=100mm
電源	AC100~200V/アダプタDC24V
重量	7.8kg(本体)/0.6kg(ACアダプタ)
付属品	ソフトウェアCD・予備プランジャ・PC接続ケーブル・ACアダプタ等
標準価格	要見積
ゴム試験片	ZY-917 6種類セット(検査表付) ¥42,000



■GS-680用Oリング測定装置

線径0.5~10mmのOリングのセンター合わせ用装置です。Oリングを位置決め固定するステージ中央部のピンは上下左右に独立して微動し、位置合わせをします。また、ステージは任意の位置に回転させることも可能です。

仕様

型式	ZY-921
ステージ寸法	90×86mm
適応Oリング径	φ0.5~φ10mm
質量	2.9kg
価格	¥158,000


ZY-921

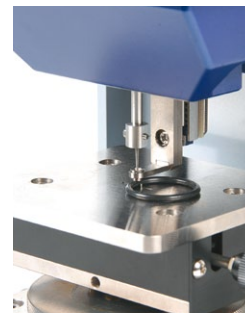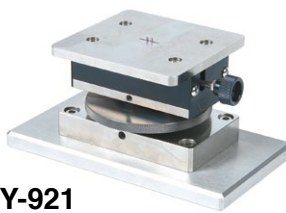



■デュロメータ測定用ゴム片

本品はゴム試験片ではありません。あくまでもデュロメータの異常を発見する為の簡易チェック用ゴム片です。お買い上げ時点の硬さを測定し、日常のデュロメータの管理にご使用下さい。

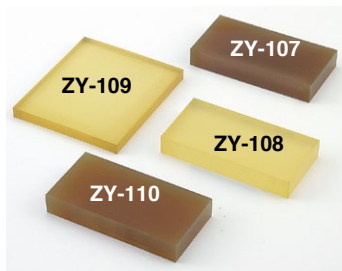

□仕 様

型式	硬さ区分	寸法(mm)	推奨デュロメータ	標準価格
ZY-107	A 中硬さ(A50付近)	40×80×厚さ12	タイプA(GS-GSD-719シリーズ)	¥5,500
ZY-108	A 高硬さ(A80付近)	40×80×厚さ12		¥5,500
ZY-109	D 低硬さ(D40付近)	70×80×厚さ7	タイプD(GS-GSD-720シリーズ)	¥5,500
ZY-110	E 高硬さ(E80付近)	40×80×厚さ12	タイプE(GS-GSD-721シリーズ)	¥5,500

このゴム片に適用するデュロメータは、JIS K 6253準拠のタイプA,タイプD,タイプEです。
ゴム片についての校正証明書は発行できません。但し、検査表の発行はできます。


■デュロメータによる測定値の比較について

タイプAを基準にした、各デュロメータの測定データの比較表です。硬さの値は測定時の温度・湿度、寸法・形状、また加硫条件など多くの要因により一定の範囲内で変動するため、各タイプ間の完全な相関関係の立証は不可能ですが、右記の表を比較値としてご参照ください。

タイプ A JIS K 6253 JIS K 7215	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
(旧A) JIS K 6301 (廃止規格)		10	20	30	40	50	60	70	80	90	
タイプ E JIS K 6253		20	30	40	50	60	70	80	90		
JIS S 6050 SRIS (旧)		20	30	40	50	60	70	80	90		
タイプ E2 TECLOCK E2		30	40	50	60	70	80	90			
タイプ D JIS K 6253 JIS K 7215						10		20	30	40	50
タイプ D0 ASTM D 2240			10		20	30	40	50	60	70	80 90
タイプ O ASTM D 2240		20	30	40	50	60	70	80			
タイプ O0 ASTM D 2240		50	60	70	80	90					
タイプ B ASTM D 2240		10		20		30	40	50	60	70	80 90
タイプ C ASTM D 2240					10	20	30	40	50	60	70 80

■すべてのテクロック・デュロメータに校正証明書が発行できます

デュロメータもISO-9001の「監視機器及び測定機器」に該当する場合があります。
テクロックはISO9001認証を受けており、校正書類に必要なトレーサビリティ体系図、校正証明・検査成績書(3点セット)の発行ができます。

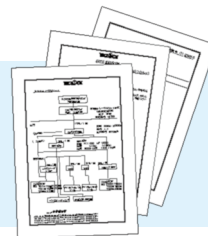



資料 テクロックデュロメータ(ゴム・プラスチック硬度計)関連規格一覧表①

試験器の仕様	規格名	JIS K 6253-2012			JIS K 6301-1995 (1998年規格廃止)	
	加圧面寸法	タイプA	タイプD	タイプE ※1	A形	C形
	押針(圧子)軸部直径	φ12mm以上(但しスタンド用はφ18±0.5mm)			直径10mm以上、約3.2mmの穴	
	押針(圧子)先端直径					
	押針(圧子)先端角度					
	押針(圧子)の加圧面より出ている量					
	硬度0の荷重	550mN (56.1gf)	0 mN (0 gf)	550mN (56.1gf)	539.5mN (55gf)	981mN (100gf)
	硬度100の荷重	8,050mN (821.1gf)	44,500mN (4,533gf)	8,050mN (821.1gf)	8,385mN (855gf)	44,130mN (4,500gf)
	荷重精度	±75mN (8.16gf)	±445mN (44.9gf)	±75mN (8.16gf)	±8gf	±20gf
	指示値の許容値	±1目盛	±1目盛	±1目盛	±1目盛	±0.45目盛
その他準拠規格		ASTM D 2240 ISO 7619				
試験片及び測定条件	試験片				加圧面寸法以上	
	平坦部寸法	6mm以上			12mm以上	6mm以上
	厚さ	ワーク端から12mm以上				
	測定位置	ワーク端から15mm以上				
	読みとりの時間	加硫ゴム3秒後 熱可塑性ゴム15秒後			直ちに読みとる(又は一定時間後)	
	測定回数及び測定値のまとめ	6mm以上離れた5ヶ所の中央値			5ヶ所の平均値	
	表示	表示: A45	表示: D50	表示: E 60	表示: Hs (JIS A) 50	表示: Hs (JIS C) 50
規定に適用している材料	定圧荷重器の重り	1 ^{+0.1} ₀ kg	5 ^{+0.5} ₀ kg	1 ^{+0.1} ₀ kg	1kg	5.0kg
	温度条件	23±2℃ / 3時間以上			20° ~ 30℃ / 1時間	
	試験料ならし時間	23±2℃ / 3時間以上			20° ~ 30℃ / 1時間	
使用範囲		A20~90 [A90以上 タイプDを使用 A20未満 タイプEを使用]			A>70 C形を使用 C形は30~90の範囲が望ましい	
規定に適用している材料		一般ゴム(中硬さ用)	一般ゴム(高硬さ用)	軟質ゴム(低硬さ用)	一般ゴム	硬質ゴム
当社デュロメータ型式		GS-719N	GS-720N	GS-721N	GS-706N	GS-703N
標準置針		GS-719G	GS-720G	GS-721G	GS-706G	GS-703G
当社デジタルデュロメータ型式		GSD-719Jシリーズ	GSD-720Jシリーズ	GSD-721J	GSD-706J	

※1 ISO 7619は、タイプAタイプと呼ぶ ※2 スタンド用は500mm²以上



試験器の仕様	規格名	JIS K 7215-1986		JIS S 6050 / JIS 7312
	加圧面寸法	タイプA	タイプD	約14×50mm 中心約5.2mmの穴
	押針(圧子)軸部直径	直径12mm以上、中心部に直径3 ^{+0.5} ₀ mmの穴		
	押針(圧子)先端直径			
	押針(圧子)先端角度			
	押針(圧子)の加圧面より出ている量			
	硬度0の荷重	549mN (56gf)	0 mN (0 gf)	0.54N (55.1gf)
	硬度100の荷重	8,061mN (822gf)	44,483mN (4,536gf)	8.39N (855.5gf)
	荷重精度	±78mN (±8 gf)	±441mN (±45gf)	±8 gf
	指示値の許容値	±1目盛	±1目盛	±1目盛
その他準拠規格		ASTM D 2240 / ISO 868 (SHORE A) (DIN 53 505)	ASTM D 2240 / ISO 868 (SHORE D) (DIN 53 505)	JIS S 6050 (プラスチック字消し)
試験片及び測定条件	試験片	幅25mm以上		加圧面寸法以上
	平坦部寸法	6mm以上、HDD40以上は2mmでよい		10mm以上
	厚さ	ワーク端から12mm以上		
	測定位置	1秒以内(1秒以上の時は時間を付記)		最初に荷重をかけた時、及び30秒後
	読みとりの時間	6mm以上の距離、5回出来れば10回の平均値		5ヶ所の最大値と30秒後のそれぞれの平均値
	測定回数及び測定値のまとめ	表示: HDA83		表示: HDD56
	表示	約1 kg		約5 kg
規定に適用している材料	定圧荷重器の重り	約1 kg		1kg
	温度条件	23±2℃ 50±5% (湿度)		20~30℃ / 1時間
	試験料ならし時間	88時間(測定値が変わらなければ短縮してよい)		
使用範囲		原則として20~90の間で使用 A>90 Dを使用、D<20 Aを使用		
規定に適用している材料		プラスチック用。プラスチックフィルム、テープ、フォーム プラスチックは除く。エラストマーに用いて良い		プラスチック字消し
当社デュロメータ型式		GS-709N	GS-702N	GS-701N
標準置針		GS-709G	GS-702G	GS-701G
当社デジタルデュロメータ型式		GSD-719Jシリーズ	GSD-720Jシリーズ	GSD-701J



資料 テクロックデュロメータ(ゴム・プラスチック硬度計)関連規格一覧表②

規格名		ASTM D 2240-05					
		タイプB	タイプC	タイプDO	タイプO	タイプOO	
加圧面寸法		6mm直径2.5～3.2mmの穴					
試験器の仕様	押針（圧子）軸部直径						
	押針（圧子）先端直径						
	押針（圧子）先端角度						
	押針（圧子）の加圧面より出ている量	2.5±0.04					
	硬度0の荷重	550mN (56.1gf)	0 mN (0 gf)		550mN (56.1gf)	203mN (20.7gf)	
	硬度100の荷重	8,050mN (821.1gf)	44,450mN (4,533gf)		8,050mN (821.1gf)	1,111mN (113.3gf)	
	荷重精度	±0.075N	±0.4445N		±0.075N	±0.0182N	
	指示値の許容値	±1目盛				±2	
	その他準拠規格		—————				
	試験片及び測定条件	試験片	押針の先から半径6mm以上				
平坦部寸法		6mm以上					
厚さ		ワーク端から12mm以上					
測定位置		1秒以内(又は供給者との間で決められた時間後)					
読みとりの時間		6mm離れた5ヶ所の平均値あるいは中央値					
測定回数及び測定値のまとめ		1kg推奨					
定圧荷重器の重り		1kg推奨	5kg推奨		1kg	—————	
温度条件	23±2℃						
試験料ならし時間	20～90						
使用範囲		20～90					
規定に適している材料		ゴム、セルラー材料、弾性材料、熱可塑性エラストマー及び硬質・軟質プラスチック					
当社デュロメータ型式	標準置針	GS-750G	GS-751G	GS-752G	GS-753G	GS-754G	
当社デジタルデュロメータ型式		GSD-750J	GSD-751J	GSD-752J	GSD-753J	GSD-754J	

ASTM D 2240は、ほかにタイプA、タイプD、タイプEが規定されています。左記のJIS K 6253の項をご参照下さい。
また、タイプOOO、タイプMも規定されていますが、テクロックでは特注扱いとしています。

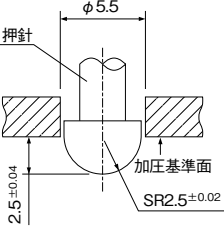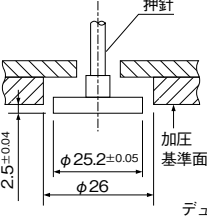試験器の仕様	規格名		テクロック規格	
	加 圧 面 寸 法		タイプE2	タイプFO
	押 針（圧子）軸部直径		16mm以上、直径5.5mmの穴	直径80mm以上、中心直径26mmの穴
	押 針（圧子）先端直径			
	押 針（圧子）先端角度			
	押針（圧子）の加圧面より出ている量			
	硬 度 0 の 荷 重		550mN (56.1gf)	550mN (56.1gf)
	硬 度 1 0 0 の 荷 重		4,300mN (438.6gf)	4,300mN (438.6gf)
	荷重精度	荷 重 の 許 容 量	0.04N (±4gf)	0.04N (±4gf)
		指 示 値 の 許 容 値	±1目盛	±1目盛
試験片及び測定条件	その他準拠規格		—————	—————
	試 験 片	平 坦 部 寸 法	加圧面寸法以上	加圧面寸法以上
		厚 さ	10mm以上	30mm以上が望ましい
	測 定 位 置			
	読 み と り の 時 間		1秒以内	1秒以内
	測定回数及び測定値のまとめ		6mm以上離れた5ヶ所の中央値	80mm以上離れた5ヶ所の中央値
	定 圧 荷 重 器 の 重 り		—————	—————
	温 度 条 件		23±2℃	23±2℃
	試 料 な ら し 時 間			
使 用 範 囲				
規 定 に 適 し て い る 材 料			ソフトスポンジ	発泡スポンジ、ウレタンフォーム
当 社 デュロメータ型式		標 準	—————	—————
		置 針	GS-743G	GS-744G
当 社 デジタルデュロメータ型式			GSD-743J	GSD-744J